


# LWF670

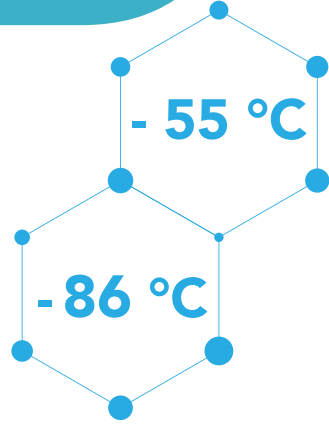


## OPSİYONLAR

- Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi
- Dahili SD kart sayesinde (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Veri yazıcısı (Termal)
- Geniş ekran seçeneği
- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	931x913x2168
İç Ölçüler WxDxH (mm)	624X635X1607
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	1000x1050x2240
Net Hacim (L)	606
Brüt Hacim (L)	637
Net Ağırlık (kg)	235
Brüt Ağırlık (kg)	250
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120
Çalışma Sıcaklığı	(-55) / (-86) °C
Set Edilen Sıcaklık	-86 °C
Voltaj	220 / 240 V
Frekans	50 hz
Güç Tüketimi	12,75
Amper (A)	9,7
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R410a/R508b
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / Çekmeceler	5
20" Konteyner Yükleme Adedi	10
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26



LWF670

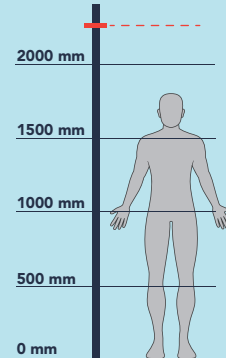

Klasik soğutma sistemine göre çok daha verimli bir soğutma performansı sağlayan raftan soğutma sistemine sahiptir. Ürünler ısı transferi ile doğrudan raftan soğutulur. Dolap kapağının içinde bulunan ekstra kapaklar, dolap açıldığında sadece ihtiyaç duyulan rafın kapağının açılmasını, diğer rafların ısı kaybına uğramasını sağlamaktadır. Çift kompresörün sağladığı kaskad sistemiyle çalışan LWF670 derin dondurucu, en hassas ürünlerin -86 °C'de uzun süreli güvenle saklanmasını sağlar. Özel kapı kolu tasarımı ve çift conta sistemi sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlar. Opsiyonel CO<sub>2</sub> besleme ünitesine sahiptir.